

Pomůcky pro přemísťování pacientů



SAMARIT

SAMARIT ROLLBORD

- STANDARD
- JUNIOR
- ROLLMAT
- MINI-GYN
- SOFT-BED
- Sterilizovatelný
- Ambulanční



SAMARIT ROLLOVER

- EASY
- LONG-GLIDE



SAMARIT TRANSGLIDE

- LARGE
- SMALL



ROLLBORD Rolováním umožňuje přesun pacientů v rovině



Pacienta otočíme na bok, pod tělo zasuneme ROLLBORD a pacienta otočíme zpět



Lehkým tlakem na kyčel a ramena posunujeme pacientem (bez použití síly)




Pacienta otočíme na bok, vysuneme ROLLBORD a pacienta otočíme zpět

• hmotnost pouze 3 kg

- pevný povrch, odolný proti protržení
- propustný pro rentgenové paprsky
- netoxický materiál
- zdravotně nezávadný
- bezpečný a příjemný pro pacienty
- pevná a odolná konstrukce
- lehce čistitelný
- čistitelná ochranná folie z PE
- skládací provedení
- minimální námaha pro personál

Snadné použití

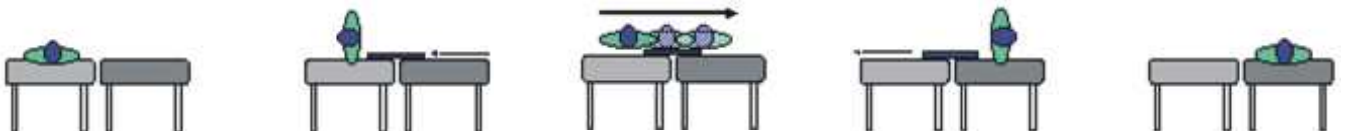

SAMARIT

STANDARD

skládací



Vhodný pro radiologii,
operační sály, JIP
180 x 50 cm

JUNIOR

skládací



Pro všeobecné použití,
ošetřovny, geriatrici,
180 x 50 cm

ROLLMAT

skládací



Vhodný pro radiologii,
MRI, všeobecné použití
180 x 50 cm

MINI-GYN

neskládací



Vhodný pro gynekologii,
urologii
82 x 50 cm

SOFT-BED

neskládací



Vhodný pro ošetřovny,
geriatrici
Zpevněná konstrukce
180 x 50 cm

STERILIZOVATELNÝ

skládací



Vhodný pro popáleninová
centra, speciální operační
sály, sterilizovatelný povlak
176 x 50 cm,

URGENTNÍ PŘÍJEM

skládací



Vhodný pro vozidla
záchranné služby.
165 x 40 cm
Zpevněná konstrukce

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

neskládací



Vhodný pro vozidla
záchranné služby.
80 x 40 cm
Zpevněná konstrukce

TRANSLIDE

přemostění výškových rozdílů




Umožňuje přemostit
výškové rozdíly do 15 cm.
170 x 65 cm
140 x 48 cm

TRANSLIDE

Umožňuje přemostění výškových rozdílů do 15 cm

- hmotnost pouze 3,5 kg
- tuhá konstrukce
- toxikologicky nezávadný
- chemicky odolný
- antistatické provedení
- kluzný povrch
- radiolucentní
- skladný
- příznivá cena
- výškové přemostění do 15 cm

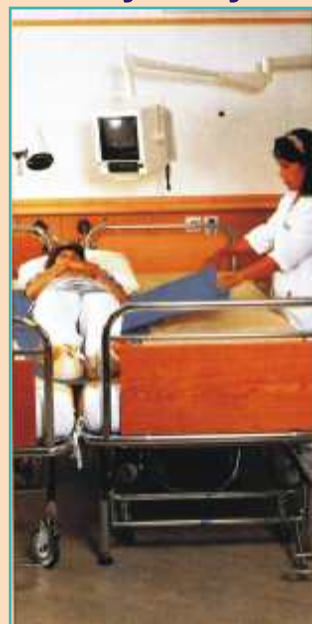

- Pacienta otočíme s prostěradlem na bok, TRANSLIDE vsuneme pod prostěradlo a pacienta otočíme zpět
- Pacienta přesuneme rovnoměrně přes TRANSLIDE na lůžko do požadované polohy
- Lehce pootočíme pacienta na bok a TRANSLIDE opatrně vyjmeme



Povlak
150 x 150 cm
Nylon

Rozměry:
170 x 65 cm
140 x 48 cm

SAMARIT
TRANSLIDE

Pomůcky pro rehabilitaci a domácí péči



PAT - SLING
pro přesun



GLIDEBOARD
kluzná deska



TURNPLATE
otočný kotouč



CARECLIDE
podložka k přesunu

SAMARIT



Medial spol. s r.o.
tel.: +420 271028300

Zákaznické centrum
fax: +420 271028320

E-mail : info@medial.cz

Obchodní 110 25170 Čestlice
<http://www.medial.cz>